

CHAMPIONS-IMPLANTS

Nouvelle gamme en pZircono

Fort du succès de sa gamme titane, Champions-Implants a présenté en exclusivité sa nouvelle gamme d'implants en pZircono à l'occasion de l'IDS.



White New-Art White (R) Evolution

Le pZircono, matériau breveté, se différencie grâce à un procédé de stabilisation optimisé lui conférant une plus grande élasticité que le traditionnel oxyde de Zircon employé en dentaire. L'avantage ? Un risque moindre de fracture.

Concepteur du pZircono, le Pr Wolfgang Burger, a fait, depuis plus de 10 ans, du Zircon sa spécialité et est à l'origine de nombreux brevets de pointe en la matière. Il a exposé ses nombreux travaux de recherches concernant le pZircono lors du symposium de Champions-Implants à Mayence les 16 et 17 mars dernier.

La nouvelle gamme de Champions permet de proposer une alternative au titane, compatible avec la trousse de chirurgie et la gamme de prothèse existante, en conservant un protocole de pose et de restauration similaire à la gamme titane.

Ainsi l'implant deux pièces White (R) Evolution conserve la même qualité connectique que son grand frère le (R)Evolution, via le maintien d'un shuttle transgingival en titane de même dimension (cédant sa place après l'ostéointégration au pilier définitif). Les nombreux avantages de la qualité connectique et du shuttle (implant protégé des infiltrations bactériennes durant toute l'ostéointégration, pas de réouverture au second temps, travail supra-gingival...) sont ainsi toujours existants chez la White (R)Evolution.

La nouvelle gamme comprend

également des implants monoblocs sur lesquels les divergences d'axes peuvent être corrigées via des coiffes en oxyde de zircon appelées les Prep-Caps. Ces dernières sont déjà utilisées depuis de nombreuses années avec succès sur les monoblocs titane et permettent en plus d'assurer le parallélisme, de s'affranchir d'analogues et de transferts ; la procédure rejoignant le protocole d'une couronne sur moignon naturel.

La nouvelle gamme en pZircono sera disponible à partir de début juin. Découvrez également la gamme lors des formations proposées chaque mois dans le nouveau centre de Champions-Implants en Allemagne. ■

INFOS

Nicole Decher
Service clients France
0049 6734 914080 16
nicole.decher@champions-implants.com


Fanny Rougnon-Glasson
Coordnatrice France
06 40 75 69 02
fanny@championsimplants.com

Champions-Implants Gmbh
Champions Platz 1
55237 Flonheim
Allemagne

www.champions-implants.com

L'agenda perpétuel de rendez-vous

Cet agenda va vous faciliter la vie au cabinet !

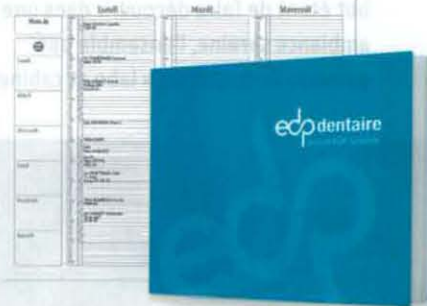

Couverture et page intérieure

Format 30 x 24 cm, 65 semaines sans mention de date (personnalisable).

Il vous permet de gérer vos rendez-vous par modules de 10 minutes, de consigner de façon exacte urgences et rendez-vous courts. Pas de dimanches ni de pub, une amplitude horaire de 8h00 à 20h00, cet agenda va devenir un outil privilégié de votre vie professionnelle.

Avec en plus à photocopier à volonté un questionnaire de connaissance, un questionnaire médical, une fiche de premier rendez-vous et des tableaux de bord de suivi des devis.

Commandez dès aujourd'hui en ligne sur

www.librairie-garanciere.com